




EveryWare – Verlässliche telemedizinische Betreuung von Patienten mit Atemwegserkrankungen

EveryWare ist eine sicher gehostete, cloudbasierte Anwendung, die Klinikern und Pflegekräften EveryWare-Zugang zu den Therapiedaten ihrer Patienten bietet.

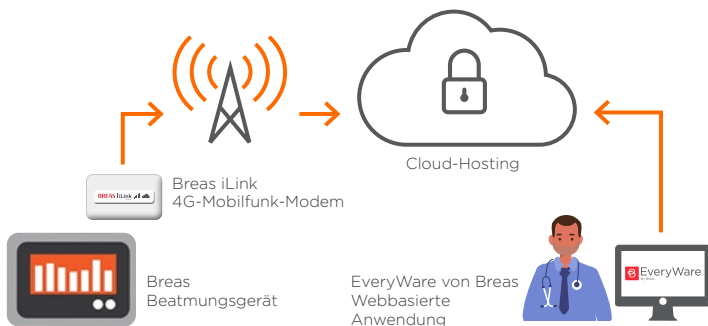

EveryWare ermöglicht die Gesundheitsversorgung außerhalb des Krankenhauses und erlaubt dadurch die produktivere Nutzung der Ressourcen des Gesundheitswesens und die Reduzierung teurer Einweisungen in spezialisierte Gesundheitseinrichtungen.

SICHER GEHOSTET

EveryWare ist eine sicher gehostete, cloudbasierte Anwendung, die Klinikern und Pflegekräften EveryWare-Zugang zu den Therapiedaten ihrer Patienten bietet.

4G-MOBILFUNK-VERBINDUNG

Durch die Übertragung über eine 4G-Mobilfunkverbindung kann ein verlässliches telemedizinisches Management von Breas-Patienten gewährleistet werden, die in die Gerätenutzung eingewiesen werden, während gleichzeitig die neuesten Anforderungen an die Cybersicherheit erfüllt werden.

VERSORGUNG NACH DEM AUSNAHMEPRINZIP

EveryWare wurde nach dem Konzept „Führen nach dem Ausnahmeprinzip“ (Management by Exception) entwickelt. Das Ziel ist es, durch die intuitive Benutzeroberfläche und die übersichtliche Darstellung der Therapiedaten, erkenntnisgestützte Einblicke zu gewinnen.

Wir bei Breas sind uns bewusst, dass die zunehmend älter werdende Bevölkerung und die moderne Lebensweise mit chronischen Erkrankungen einhergehen, die die Gesundheitsversorgung, Ressourcen und die Budgets stark beanspruchen.

Das Management von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen ist mit komplexen Anforderungen verbunden, für die es eines multidisziplinären Teams bedarf.

Die Telemedizintechnologie bietet nicht nur die Möglichkeit, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und ihre Behandlung effektiver zu gestalten, sondern auch die Interaktionen mit den Patienten vorausschauender zu planen und unnötige Interaktionen zu vermeiden.



Lehrvideos und andere Schulungsmaterialien zu den Themen Beatmung und Sekretmanagement erhalten Sie durch Scannen oder Klicken auf den QR-Code, der Sie zur Website von Education by Breas führt.



„Remote-Einstellungen“, das neueste Update für EveryWare by Breas ist jetzt verfügbar

Mit „Remote-Einstellungen“ für die nicht lebenserhaltenden Beatmungsgeräte von Breas wurde der zentrale Wert von EveryWare, das Erzielen von Ergebnissen durch Optimierung, in die Tat umgesetzt.

Da jeder Patient anders auf die Behandlung anspricht, kann es sein, dass das medizinische Fachpersonal die Einstellungen anpassen muss, um maximalen Komfort zu gewährleisten und das Behandlungsergebnis ihrer Patienten zu optimieren. Bisher waren für diese Anpassungen meistens mehrere persönliche Termine erforderlich, zu denen die Patienten das Beatmungsgerät mitbringen mussten.

Dank EveryWare kann dieser Prozess nun beschleunigt werden, da die Einstellungen über die Cloud geändert werden können. Die bisher für diese Arbeiten aufgewendete Zeit kann nun für die Behandlung komplexerer Patientenfälle oder für eine produktivere Ressourcennutzung eingesetzt werden.

Mit EveryWare kann das Pflegepersonal die Einstellungen von IPAP/EPAP bis hin zu Inspirationszeit (Ti) und nasaler High-FlowTherapie (HFNT)* sowie Alarmer von niedrigem Druck bis hin zu hohem EtCO₂-Wert aus der Ferne ändern.



Vivo 1



Vivo 2



Vivo 3

„Gilt nur für Vivo 3“

Anforderungen an Remote-Einstellungen:

- EveryWare 2.0.x mit einer autorisierten Benutzerrolle
- kompatibles nicht lebenserhaltendes Beatmungsgerät und Firmware von Breas
- Verbindung mit iLink mit Mobilfunkverbindung